

EMPRESA

— FEATURING FLOORBED TECHNOLOGY —

THE
EMINENCE
COLLECTION
by Accora



'Elk ontwerp
begint met
een beter
verhaal'

Lorinda Mamo,
ontwerper

Uw verhaal

Eindelijk! Een bed dat werkelijk alles kan en voldoet aan de klinische, functie- en ontwerpeisen die u stelt.

De keuze van een verpleegbed hoeft geen compromis te zijn. Wij zijn erin geslaagd de verschillende eisen voor de zorg, veiligheid voor het personeel en de bewoners, een ergonomisch en mooi design, allemaal samen te brengen in ons nieuwe **Empresa™**-bed.

Een bed voor iedereen.





Een nieuwe generatie verpleegbedden

Niets is zo belangrijk als de eerste indruk wanneer het gaat om het aantrekken van nieuwe bewoners. De inrichting en uitstraling binnen het wzc spelen een grote rol om dit als 'thuis' te laten aanvoelen. Ondanks de nood aan specifieke bedden betekent dit niet dat deze niet mooi kunnen zijn. Ons [Empresa](#)-bed, met de vele opties waaruit u kunt kiezen, is dus de ideale partner voor jullie interieur design.

In samenwerking met ons zeer ervaren team maken we voor u een zorgbed om trots op te zijn, om een hulp te zijn bij het ontwerp van cozie kamers waarin jullie bewoners zich thuis voelen.

Raak geïnspireerd.

Buitengewoon veilig

Al sinds de oprichting helpt Accora gezondheidszorg veiliger te maken. Onze uitstekende FloorBed®-technologie heeft zich bewezen op het gebied van val- en letselpreventie¹, en daarmee is de standaard gezet voor de verwachtingen van een laag bed.

Omdat vallen de voornaamste oorzaak is op ernstige letsels en overlijden bij oudere mensen², kan het FloorBed-technologie in de langdurige zorg een belangrijke rol spelen bij het preventiebeleid van vallen. Waar bewoners extra bescherming nodig hebben, kan het installeren van een valmat helpen het risico nog verder te verkleinen door een mogelijke val te veranderen in een simpele rolbeweging.

Valincidenten in de slaapkamer werden met 80% verminderd en uit bed vallen werd geheel voorkomen.



Kan tot op 100 mm verlaagd worden




Valmat


Samenvatting van de resultaten van de productevaluatie

Omschrijving	Basisniveau	Post FloorBed	Trend
Bewoners die vielen	9 (van 12)	5 (van 12)	▼ 44%
Valincidenten in de slaapkamer (excl. badkamer)	15	3	▼ 80%
Bekend letsel en/of vereiste diagnostische/medische behandeling	2	0	▼ 100%
Val uit het bed	7	0	▼ 100%




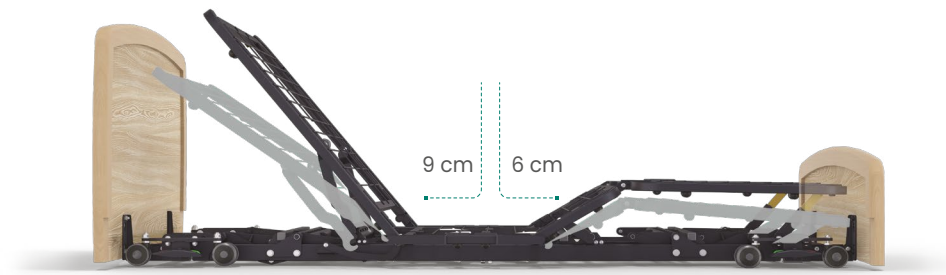


Dubbele retractie

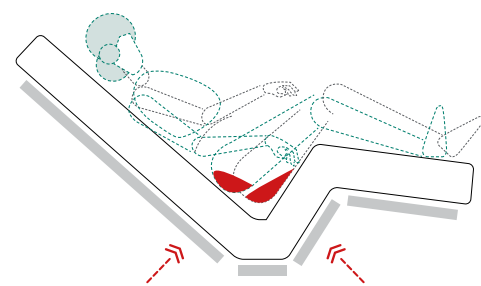


Zonder dubbele retractie is er een toename van de wrijving en schuiven

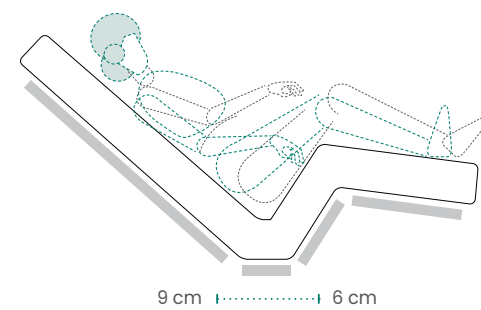

Dubbele retractie 1}-
regressie vermindert wrijving en schuiven

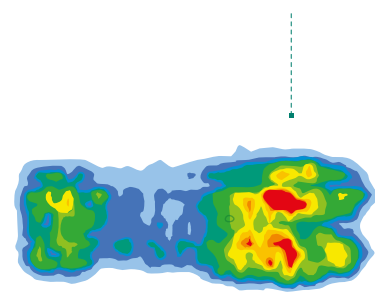

Drukaart : zonder dubbele retractie

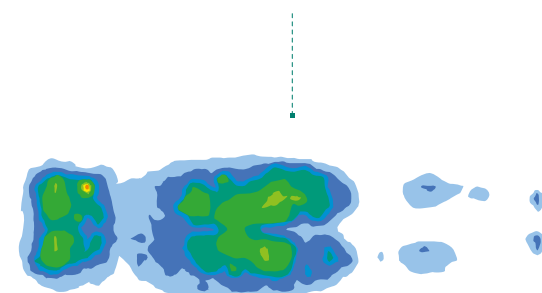

Drukaart : dubbele retractie voorkomt doorligwonden

Uitstekende zorg

De introductie van ons dynamisch dubbel retractie systeem™ is een complementaire hulp bij eerstelijns preventiemaatregelen tegen decubitus.

Bij het omhoog komen vanuit een liggende naar een zittende positie in het bed, rekt het lichaam vanzelf uit. De dubbele retractie van het [Empresa BodyMove](#) houdt rekening met deze verandering. Niet alleen helpt deze functie de druk te verdelen, maar ook het comfort wordt hierdoor verbeterd. Bij het ontwerpen van het Empresa bed staat de mens centraal maar blijven de eisen tot veiligheid in zorg en zelfstandigheid van de bewoner behouden.

In vergelijking met een standaard verpleegbed, laten testresultaten met de Empresa dubbele retractie-technologie een afname van 23% zien van de gemiddelde druk in het sacrale gebied.³

Een goed ontwerp kan
een wereld van verschil
maken voor hoe een
bewoner, verzorger of
familielid zich voelt⁴..'

Jacqui Smith, interieurontwerper



Ergonomische bediening

Met een gemakkelijk te hanteren eenvoudige one-touch bediening kunt u voorgeprogrammeerde zorg- en comfort posities activeren. Met veiligheid als hoogste prioriteit, is er ook een blokkeerfunctie om onbevoegd of onbedoeld gebruik te voorkomen, alsook een automatische veiligheidsstop die ervoor zorgt dat het bed niet lager dan 200 mm zakt. Om het bed naar vloerniveau te laten zakken moet de knop tweemaal worden ingedrukt.

Voor een grote autonomie en nog meer veiligheid is het Empresa-bed uitgerust met acht zwenkwielen en ons UniSafe™-remsysteem. Het is uiterst eenvoudig om met het bed door de kamer te manoeuvreren en met slechts één enkele druk op een pedaal treden alle remmen in werking.

U heeft de controle in handen.



Zorgpositie



Comfortpositie



UniSafe™-remsysteem



Handbediening





Volledige hoogte voor zorg 800 mm



1050 mm breedte-aanpassing



Ingebouwde
verlengingsmogelijkheid

Ultieme flexibiliteit

Alles wat u nodig hebt samengebracht in één bed. De ingebouwde bedverlenging en een uitgebreid assortiment aan universele accessoires stelt u in staat om het bed optimaal te benutten voor elke bewoner. Dankzij de combinatie van gebruiksvriendelijkheid, laag risico tot uitval en eenvoudige procedure tot aankoop verdient het Empresa bed al uw aandacht.

Dankzij de ingebouwde functionaliteit kunt u kiezen uit prachtige, op maat gemaakte ontwerpen om uw verzorgingstehuis mee op de kaart te zetten.

Zo wordt het leven eenvoudiger.

'Details zijn
geen details;
ze bepalen het
product'

Charles Eames, ontwerper



Ontwerpen in hout



Arc



Atelier



Bento



Chateau



Classic



Skandi



Vogue

Gestoffeerde ontwerpen



Alexander



Alexander met hout



Belgrave



Cleveland



Finsbury




Grosvenor

Houtsoorten




Vicenza Eiken H3157

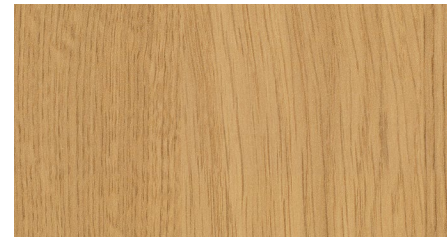


Natuurlijk Lancaster Eiken H3368



Lissa Eiken R20034

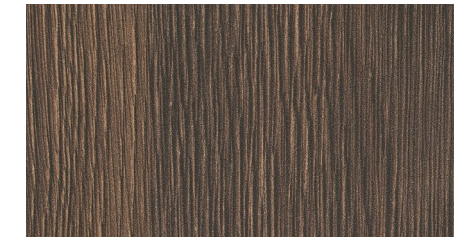

Tobacco Gladstone Eiken H3325

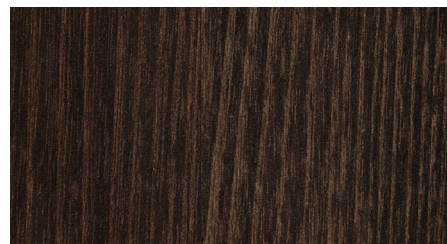


Black-Brown Thermo Eiken H1199



Beige grijs Lorenzo eiken H3146




Truffelbruin Davos eiken H3133

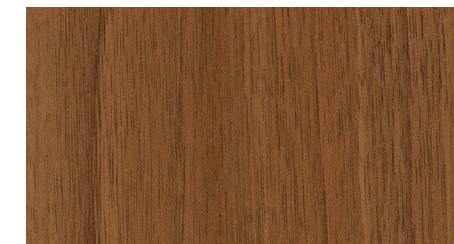


Natuurlijk Dijon Walnoot H3734




Standaard Walnoot R30001

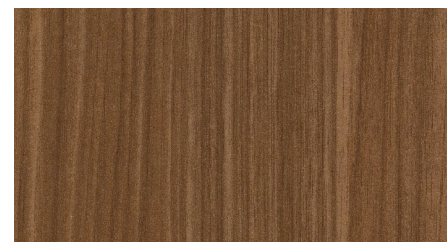


Lincoln Walnoot H1714

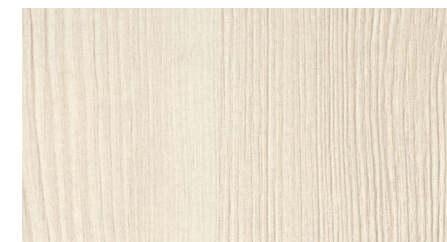


Polar Aland Grenen H3433

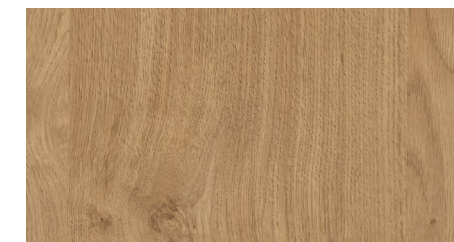


Geolied Kendal eiken H3171

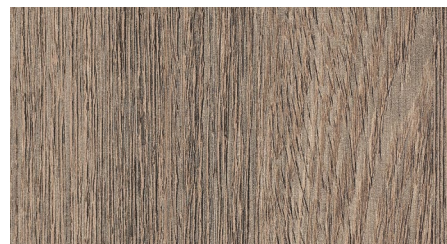


Grijs-beige Bamenda H1115

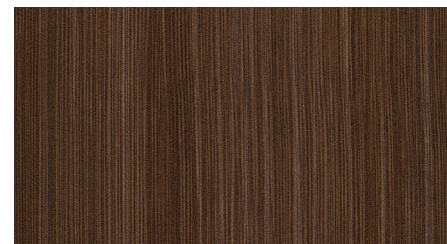

Bruin Finline Metallic H3192

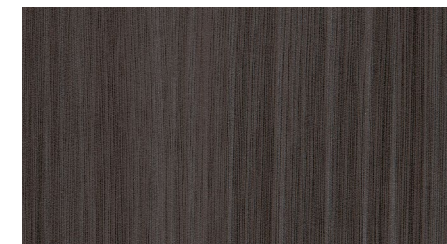


Antraciet Finline Metallic H3190

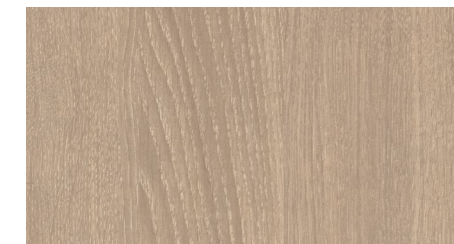


Sand Orleans Eiken H1377

Bekledingsopties

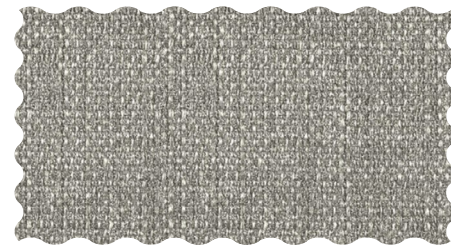

Zilver

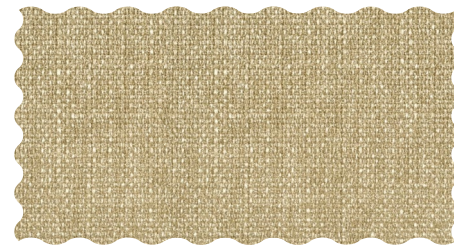

Jute




Staal




Duifgrijs




Wijnrood

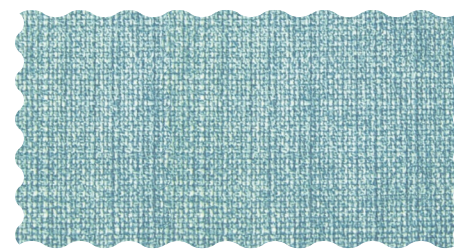


Hemelsblauw

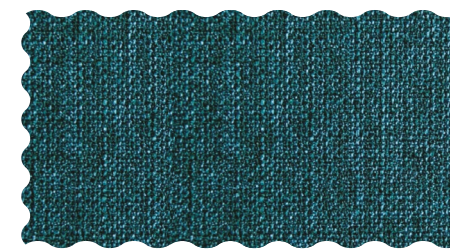


Zeegroen

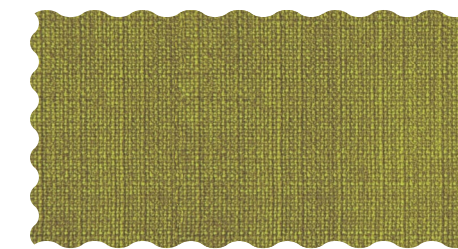


Varengroen

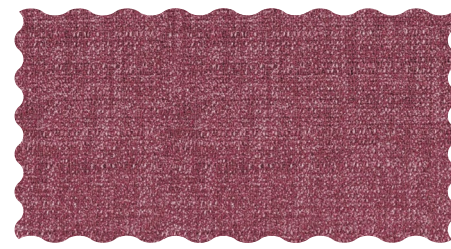


Lila

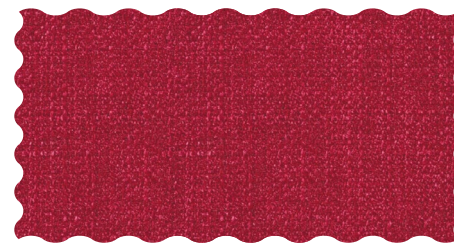


Cyclaamrood

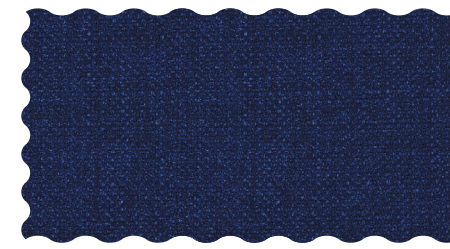


Royal

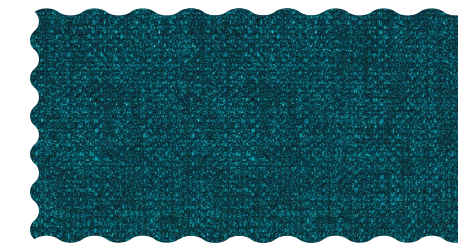


Groenblauw

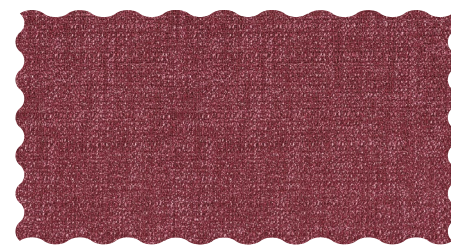

Pioen

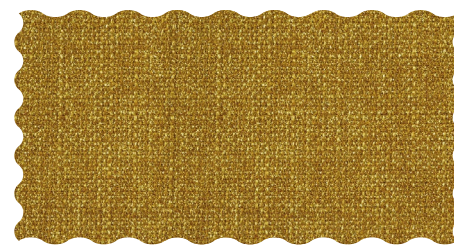

Goud

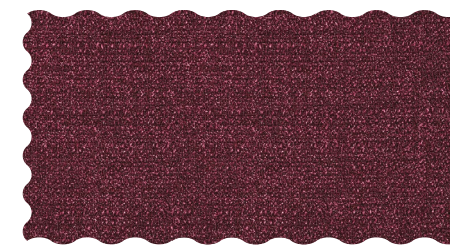

Vijg



Paddenstoel

Dit is slechts een selectie van onze bekledingsopties. Er is veel meer om uit te kiezen, waaronder afwasbare stoffen. Vraag onze productspecialist om meer informatie.

Accessoires



Bedpapegaai



1050 mm breedte-verlengstuk



Bedhendel



Valmat

Accessoires



Opklapbare bedhekken neergelaten




Opklapbare bedhekken omhoog




Opklapbare bedhekken met stootkussens



Bedhekken van stof neergelaten

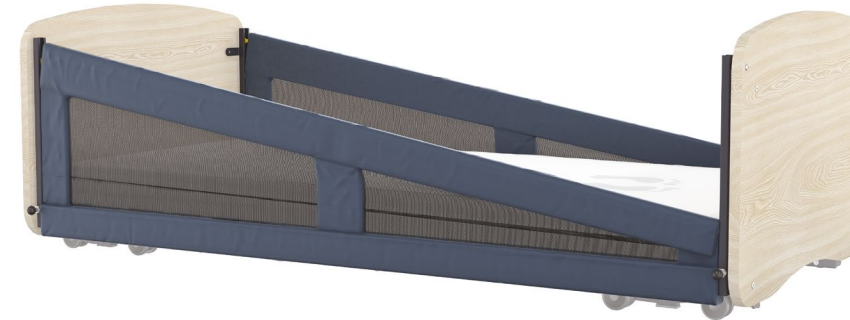

Bedhekken van stof deels omhoog

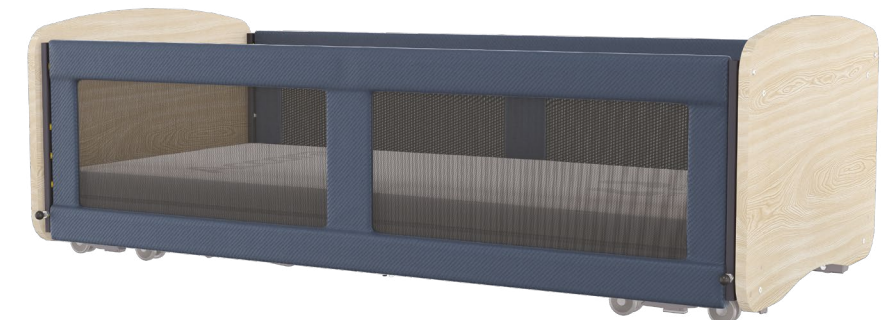

Bedhekken van stof omhoog

Technische specificatie

Totale afmetingen (Arc hoofdbord)	1015 mm breedte x 2090 mm lengte
Matrasmaat standaard breedte Matrasmaat met breedte-verlengstuk Matrasmaat met lengte-verlengstuk	900 mm breedte x 2000 mm lengte 1050 mm breedte x 2000 mm lengte 2200 mm lengte
Hoogte matrasplatform	100 mm tot 800 mm
UniSafe-remsysteem	2 stel remmen die elk 4 zwenkwielen blokkeren
8 zwenkwielen	4 vergrendelbare zwenkwielen; 4 zwenkwielen voor wendbaarheid
Diameter van het zwenkwiel	63 mm
Maximale belasting van de bedpapegaai	75 kg
Auto-regressie	BodyMove-technologie
Maximale hoek van de rugsteun	70 graden
Maximale hoek van de beensteun	36 graden
Trendelenburgfunctie	12 graden
Bescherming tegen binnendringen van vloeistoffen	IPX6
Veilige werkbelasting	275 kg
Maximale gewicht patiënt	240 kg
Garantie	Frame: 10 jaar Elektrische onderdelen: 3 jaar

Het Empresa-bed maakt deel uit van onze
Eminence™ Collectie.

THE
EMINENCE
— COLLECTION —

Afgesteld op uw wensen. Op bestelling
gemaakt door Accora.

1. Lutheran Home SLG group FloorBed: analyse van valpartijen van cliënten. Tussentijds verslag. Februari 2019

2. McCarthy M. Een Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat vallen de belangrijkste oorzaak is van sterfgevallen door letsel bij ouderen. BMJ. 2016; 354. <https://doi.org/10.1136/bmj5190>/bekeken maart 2021

3. Beschikbare gegevens. Februari 2021

4. Smith J. De rol van het interieurontwerp in de verzorging. <https://www.homesmiths.co.uk/interior-design-in-the-care-environment/> bekeken november 2020

UK:

Charter House, Barrington Road
Orwell, Cambridge SG8 5QP

T: +44 (0)1223 206 100

E: info@accora.care

W: www.accora.care

IE:

38 Main Street, Swords, Co. Dublin,
Ierland, K67 E0A2

T: +353 (0)1 695 0614

E: info@accora.care

W: www.accora.care

* en ™ zijn handelsmerken van Accora Ltd. Omdat we ons voortdurend willen verbeteren, behouden we ons het recht voor om ontwerpen aan te passen zonder kennisgeving vooraf.

Accora

EMPIBJ001 BRO-FB6-001UK Rev 02